

UpDate!

1896 **SCHWERT**
SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST



Kehlkopfspiegel FS Rhodium Laryngeal Mirrors FS Rhodium

Modern Therapy · Modern Instruments

SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA





SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

i

Kehlkopfspiegel FS Rhodium · Laryngeal Mirrors FS Rhodium

Kehlkopfspiegel FS Rhodium sind mit Rhodium auf der Glasoberfläche verspiegelt. Rhodium ist ein Edelmetall wie Gold und ist als Edelmetall chemisch resistent, selbst gegenüber Säuren.

Laryngeal mirrors FS Rhodium are metallised by "Rhodium" on the glass surface. Rhodium is a precious metal like gold and is resistant against chemicals as it is usual for precious metals, even against acids.

Die Qualitätsmerkmale sind:

- Exakt scharfes kontrastreiches Spiegelbild bis ins kleinste Detail
- Brillant farbnatürlich und angenehm hell – bei einem optimal gleichmäßigen Reflexionsspektrum
- Höchster Sehkomfort ermüdungsfrei und Augen schonend in allen Einsatzbereichen
- Einfache Reinigung durch die spezielle SCHWERT-Front Surface-Beschichtung mit Anti-Hafteffekt
- Absolut resistent gegenüber allen Arten von Desinfektion und Sterilisation, bis hin zu säurehaltigen Refresh-Reinigern

The quality characteristics are:

- Accurate and sharp, resulting in a perfect high contrast mirror image into the smallest detail
- Brilliant, bright and natural colors allow an optimal and constant spectrum of reflections
- Highest visual comfort during the treatment allow to work fatigue-proof and eye-friendly
- Simple cleaning by special SCHWERT front surface coating with special "non stick" effect
- Absolute resistant against all kinds of disinfectants and sterilizations to the point of acid containing cleaners



Spiegel mit Sechskantgriff, 18,5 cm
Mirror with hexagon handle, 18.5 cm

Artikel-Nr. Item-No.	Artikelbezeichnung Article Description
22508-30	Fig. 000 = Ø 6 mm
22508-20	Fig. 00 = Ø 8 mm
22508-0	Fig. 0 = Ø 10 mm
22508-1	Fig. 1 = Ø 12 mm
22508-2	Fig. 2 = Ø 14 mm
22508-3	Fig. 3 = Ø 16 mm
22508-4	Fig. 4 = Ø 18 mm
22508-5	Fig. 5 = Ø 20 mm
22508-6	Fig. 6 = Ø 22 mm
22508-7	Fig. 7 = Ø 24 mm
22508-8	Fig. 8 = Ø 26 mm
22508-9	Fig. 9 = Ø 28 mm
22508-10	Fig. 10 = Ø 30 mm



Spiegel, 12,5 cm, ohne Gewinde
Mirror, 12.5 cm, without thread

Artikel-Nr. Item-No.	Artikelbezeichnung Article Description
22505-30	Fig. 000 = Ø 6 mm
22505-20	Fig. 00 = Ø 8 mm
22505-0	Fig. 0 = Ø 10 mm
22505-1	Fig. 1 = Ø 12 mm
22505-2	Fig. 2 = Ø 14 mm
22505-3	Fig. 3 = Ø 16 mm
22505-4	Fig. 4 = Ø 18 mm
22505-5	Fig. 5 = Ø 20 mm
22505-6	Fig. 6 = Ø 22 mm
22505-7	Fig. 7 = Ø 24 mm
22505-8	Fig. 8 = Ø 26 mm
22505-9	Fig. 9 = Ø 28 mm
22505-10	Fig. 10 = Ø 30 mm




22500

Metallgriff für Kehlkopfspiegel, 10 cm
Metal handle for laryngeal mirrors, 10 cm / 4"

FS Rhodium


Front Surface Beschichtung:

Eine Reflexion = exakt scharfes Bild
Front Surface Coating:
One reflexion = exactly sharp picture

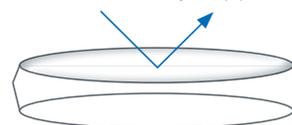

Rear Surface Beschichtung:

Doppelte Reflexion = Doppelbild
Rear Surface Coating:
Two reflexions = double picture

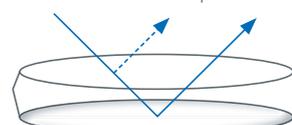

Durchmesser M 1:1 · Diameter scale 1:1

